

AS4060 - AS4190

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

KIT ACQUA STOP

LEGGERE ATTENTAMENTE

Il presente documento è relativo all'accessorio Smeg "acqua stop".

L'accessorio può essere montato esclusivamente su dispositivi Smeg, è un dispositivo che consente alla macchina di rilevare eventuali perdite idrauliche e di gestire il funzionamento in sicurezza, segnalando l'anomalia e attivando la pompa di scarico per limitare possibili danni.

Per un utilizzo corretto e sicuro il presente manuale deve essere utilizzato congiuntamente al manuale del dispositivo, lavastrumenti o lavavetriere, su cui l'accessorio è installato.

La mancata lettura, eventuali incomprensioni o interpretazioni errate delle istruzioni contenute in questo manuale possono causare danni all'apparecchio, nonché essere fonte di pericolo per l'operatore e diminuire notevolmente le prestazioni della macchina.

Il costruttore declina ogni responsabilità per utilizzi diversi da quelli indicati nel presente manuale.



L'installazione, la manutenzione e le eventuali operazioni di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato SMEG.



Qualora la macchina venisse adoperata in modo Non Conforme a quanto specificato dal costruttore SMEG, la garanzia di cui è dotata potrebbe essere compromessa.

Il materiale contenuto in questo manuale è a scopo informativo. Il contenuto e l'apparecchiatura descritta possono essere soggetti a modifiche senza che ne venga data comunicazione.

19 560 0116 00	30/10/2013
Rev.	Date

INFORMAZIONI E ASSISTENZA SUI PRODOTTI DELLA DIVISIONE SMEG INSTRUMENTS

Lo staff del nostro Ufficio Vendite può fornirVi informazioni su prezzi ed offerte.

Il nostro Ufficio di Assistenza Tecnica potrà fornirVi le indicazioni per un corretto funzionamento dell'apparecchio e mettervi in contatto col Centro Assistenza autorizzato più vicino.



instruments@smeg.it – service.instruments@smeg.it

Tutta la gamma dei nostri prodotti è visionabile sul sito internet:

www.smeg-instruments.com

International customers, please contact your local SMEG distributor.

1 COMPOSIZIONE DEI KIT (elementi primari)

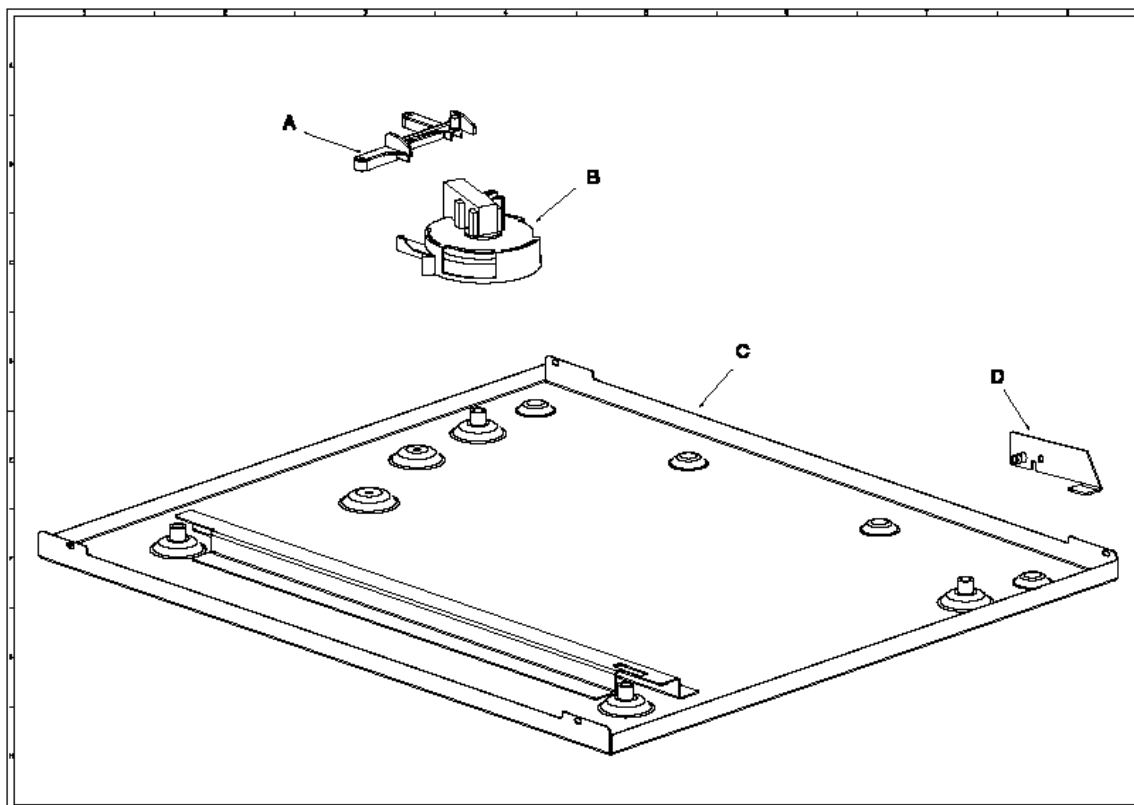
A_ SUPPORTO GALLEGGIANTE

B_ GRUPPO GALLEGGIANTE

C_ GRUPPO BACINELLA

D_ SQUADRETTA FISSA ACQUA STOP (PRESENTE SOLO SU AS4190 COD. 903079)

NOTA: Nel seguente esploso non vengono riportate le minuterie metalliche (viti, rondelle, etc.).



2 ACQUASTOP AS4060 902897 – AS4190 903079

L'accessorio AS4060 può essere montato sulle seguenti serie di dispositivi di lavaggio Smeg.

AS4060
Serie che possono essere equipaggiate con il dispositivo
GW1160
GW4060
WD1160
WD4060

L'accessorio AS4190 può essere montato sulle seguenti serie di dispositivi di lavaggio Smeg.

AS4190
Serie che possono essere equipaggiate con il dispositivo
GW4190
WD4190

3 PRECAUZIONI



A_ Effettuare un ciclo di reset della macchina.

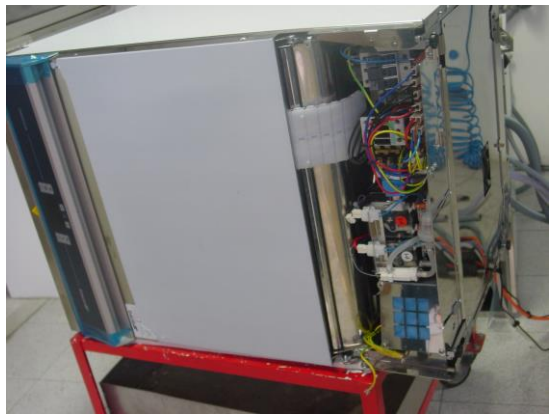
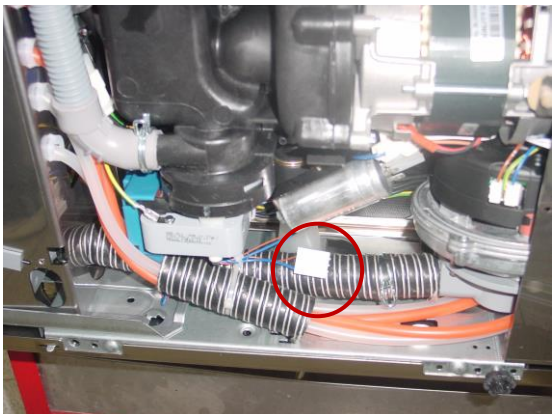
B_ Staccare la macchina dall'alimentazione elettrica

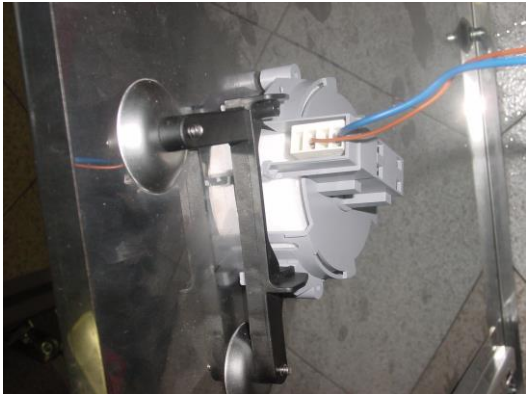
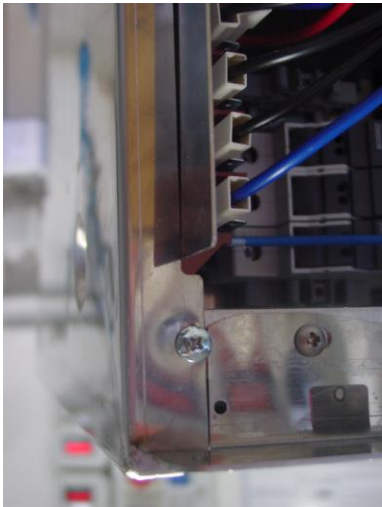
C_ togliere le lance aspirazione detergenti dalle taniche, nel caso di 4190 togliere le suddette taniche da bordo macchina.

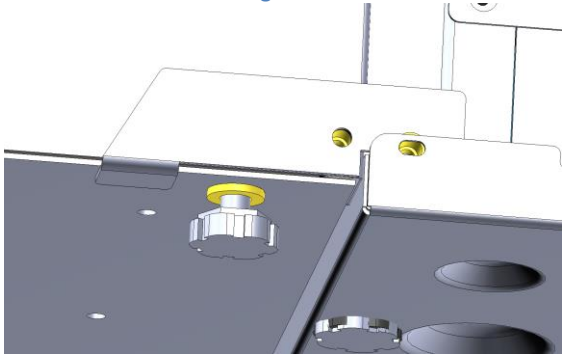
D_ scollegare gli scarichi e le prese di carico idrico dalla rete.

4 PROCEDURA

Per poter svolgere con maggiore agio le operazioni consigliamo di posizionare la macchina alta da terra e leggermente a sbalzo nella parte inferiore per favorire l'inserimento della bacinella.

PROCEDURA	ILLUSTRAZIONE
1. Ribaltare la macchina sul fianco, togliere lo zoccolo anteriore e la protezione anti gocciolamento sottostante, rimuovere i piedini.	 Figure 1
2. Rimuovere la protezione fondo in acciaio ed individuare il cablaggio da attaccare al gruppo galleggiante. (il connettore da utilizzare è fissato con una Fascetta in prossimità del fondo del dispositivo).	 Figure 2

PROCEDURA	ILLUSTRAZIONE
3. Attaccare il cablaggio facendo attenzione in quanto non è polarizzato.	 Figura 3
4. Innestare la bacinella.	 Figura 4
5. Fissare con le quattro viti in dotazione, due anteriormente, due posteriormente.	 Figura 5

PROCEDURA	ILLUSTRAZIONE
6. Per 4190, a causa del fissaggio posteriore mancante dovuto all'assenza del fianco vi è la piastrina D che si avvita al carter posteriore del mobiletto come in fig.6 e 7 e su cui si fissa la bacinella.	 Figura 6  Figura 7
7. Ultime Operazioni: Rimontare i piedini, protezione gocciolamento anteriore e zoccolo. Raddrizzare la macchina e livellarla mediante livella a bolla in modo che venga a trovarsi perfettamente orizzontale (tolleranza angolare max. consentita: 0.5°).	-



NOTA BENE

Una volta montato il kit abilitare mediante Software Smeg "TRACELOG" il dispositivo.

**Smeg S.p.A.
Instruments Division**

Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE) Italy
Tel. +39 0522 8211 – Fax +39 0522 821 592
E-Mail: instruments@smeg.it – service.instruments@smeg.it
www.smeg-instruments.com